



Guide Utilisateur ABILITY BROWSER

Téléchargement

Etape 1



Téléchargez **GRATUITEMENT**




ABILITYBROWSER
Where Accessible Solutions Live

Sur la page internet de



avec le lien direct suivant

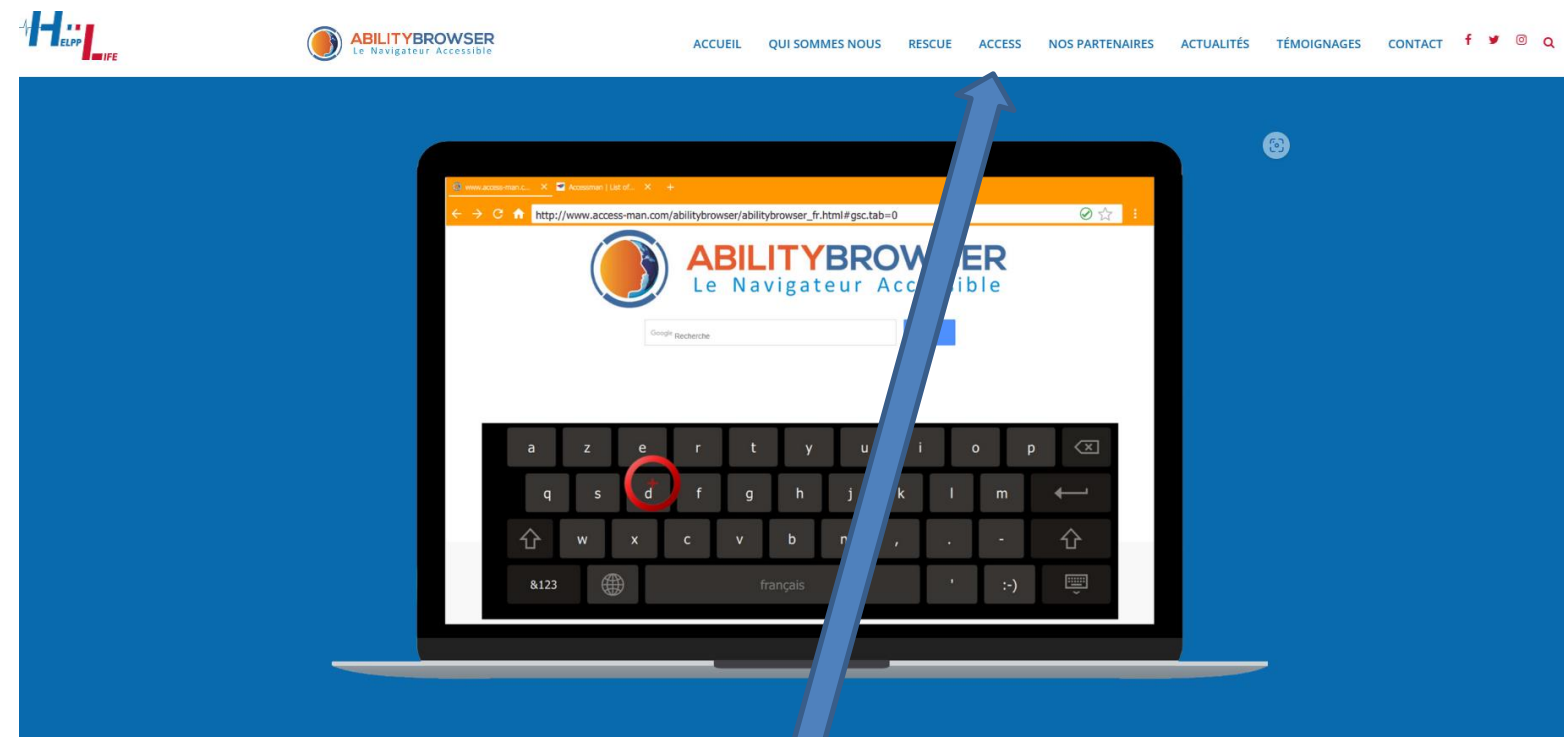

avec le lien direct suivant

OU

<https://helpp-life.fr/services/ability-browser>

Rubrique « Access » puis « solution Access » et « produit Access »

Etape 1

2 Versions

APPLE ou WINDOWS

PUIS

Consulter le Guide d'utilisation

Prix

GRATUIT

TÉLÉCHARGER LA VERSION WINDOWS


TÉLÉCHARGER LA VERSION MAC

GUIDE D'UTILISATION

SUGGÉRER / DEVENIR SITE PERSONNEL



Compatibilités

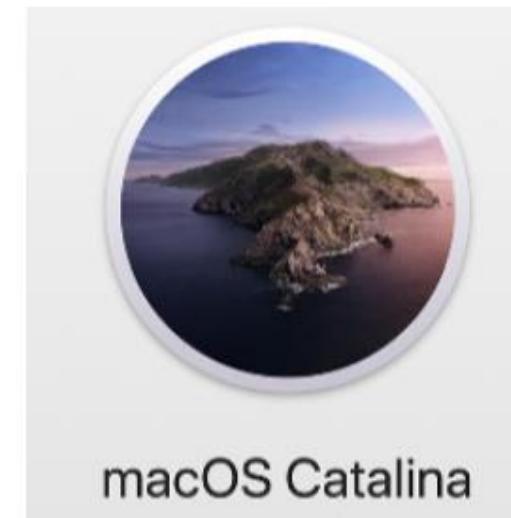

Ability Browser fonctionne avec une webcam classique de 30 images/sec minimum.

Installation & Utilisation

Etape 2

UTILISATION

1 Démarrage du programme



La webcam et le système de contrôle du curseur Head Pilot s'activent dès le démarrage.

Déplacer votre tête et piloter le curseur.
Lors que le curseur reste statique un clic est généré.




➤ Si nécessaire : activer Head Pilot

Paramètre

Head Pilot

Général

Activer le contrôle du curseur

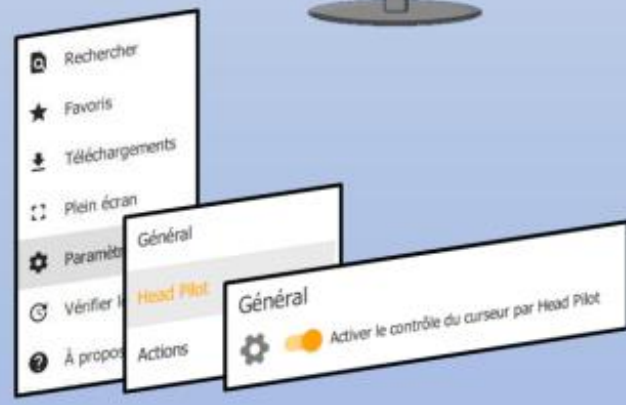


➤ Puis activer le clic auto



2 Fonctions

Au cours de la navigation, cliquer sur un champ de texte pour utiliser le clavier virtuel.

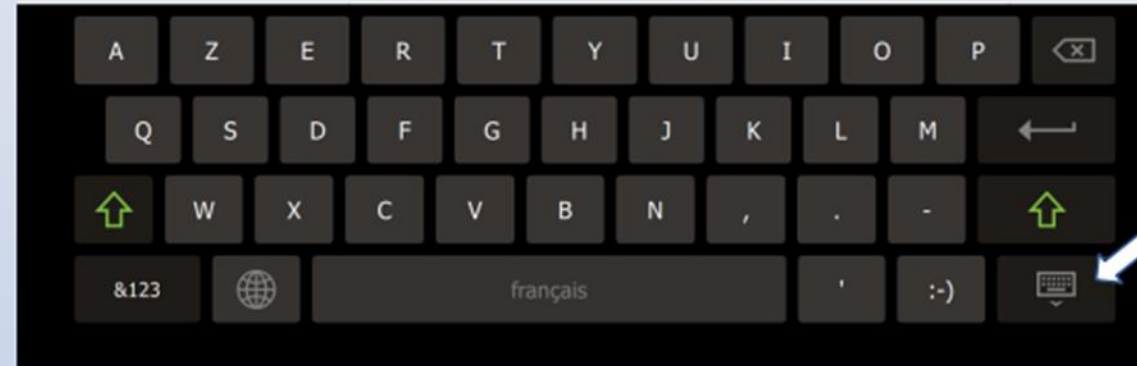

Fin d'utilisation



IMPORTANT
permet de valider les choix



Activer / Désactiver le clic automatique

Choix du mode de clic

Activer / Désactiver la loupe

Accéder au Favoris


Activer / Désactiver la magnétisation du curseur

Accéder au menu Paramètres


Etape 2

3 Paramétrage des fonctions

➤ Menu Général

<p>Page de démarrage http://www.access-man.com/abilitybrowser/abilitybrowser_fr.html <input checked="" type="checkbox"/> Lancer l'application au démarrage</p>	L'application se lancera au démarrage de l'ordinateur
<p>Langue French</p>	Choix de la langue Anglais / Français
<p>Caméra <input checked="" type="checkbox"/> Afficher la caméra EasyCamera <input checked="" type="checkbox"/> Afficher la caméra au démarrage Durée: 10 s</p>	Activer le retour camera tout au long de l'utilisation. Paramétrer la durée d'affichage
<p>Défilement <input checked="" type="checkbox"/> Activer le défilement Durée d'attente avant le défilement: 750 ms</p>	Permet les défilements Haut/Bas de la page web active. Positionner le curseur en haut ou bas de page et stopper le mouvement. Paramétrer le temps avant l'activation de la fonction.
<p>Clavier virtuel <input checked="" type="checkbox"/> Activer le clavier virtuel</p>	Permet de déployer le clavier virtuel dans les champs de texte..
<p>Moteur de recherche <input checked="" type="radio"/> Ability Browser <input type="radio"/> Google <input type="radio"/> Bing <input type="radio"/> DuckDuckGo</p>	Choix du moteur de recherche.  En cas de recherche dans la barre URL uniquement

➤ Menu Head Pilot

<p>Général <input checked="" type="checkbox"/> Activer le contrôle du curseur par Head Pilot</p>	Déclenche le mode de contrôle par les mouvements de la tête.
<p>Sensibilité Sensibilité horizontale: 87% Sensibilité verticale: 87% <input checked="" type="checkbox"/> Lier la sensibilité</p>	Régler les conditions de sensibilité en fonction de la distance avec la caméra ou du handicap de l'utilisateur. Lier ou dissocier les paramètres.
<p>Clic Auto <input checked="" type="checkbox"/> Activer le clic auto Durée avant le clic: 900 ms Zone de clic: 70</p>	Déclenche le clic automatique par temporisation. Régler le temps avant l'action. La zone de clic détermine la zone à l'intérieur de laquelle un second clic ne se déclenchera pendant cette temporisation. Sortir et entrer de la zone pour le réactiver.
<p>Loupe Largeur: 450 hauteur: 300 Niveau de zoom: 100%</p>	Gérer la taille et l'agrandissement de la loupe. Son utilisation se déclenche dans le menu verticale disponible au cours de la navigation.
<p>Magnétisation (expérimental) <input checked="" type="checkbox"/> Activer Force: 70 Distance: 370</p>	La magnétisation attire le curseur vers la zone cliquable la plus proche. Cette fonction s'emploie avec précaution. Elle ne correspond aux besoins de certains utilisateurs et gêner leur navigation. 

Etape 2









➤ Menu Actions

Barre d'actions

 Toujours visible

La Barre d'Actions accompagne l'utilisateur au cours de sa navigation. Elle peut être visible ou non.

Actions visibles

-  Clic auto
-  Clic
-  Double clic
-  Clic-droit
-  Gliser
-  Loupe
-  Favoris
-  Curseur Magnétique
-  Paramètres

Choix des actions visibles.



Rechercher un site internet

Etape 3




N'OUBLIEZ PAS de venir sélectionner cet onglet pour pouvoir valider vos choix par le sélecteur « ROND ROUGE » que vous déplacez avec vos mouvements de tête

Etape 3

1^{ère} Possibilité

Tapez le nom du site directement sur le moteur de recherche d'Ability Browser


Mon choix pour la 2^{ème} possibilité

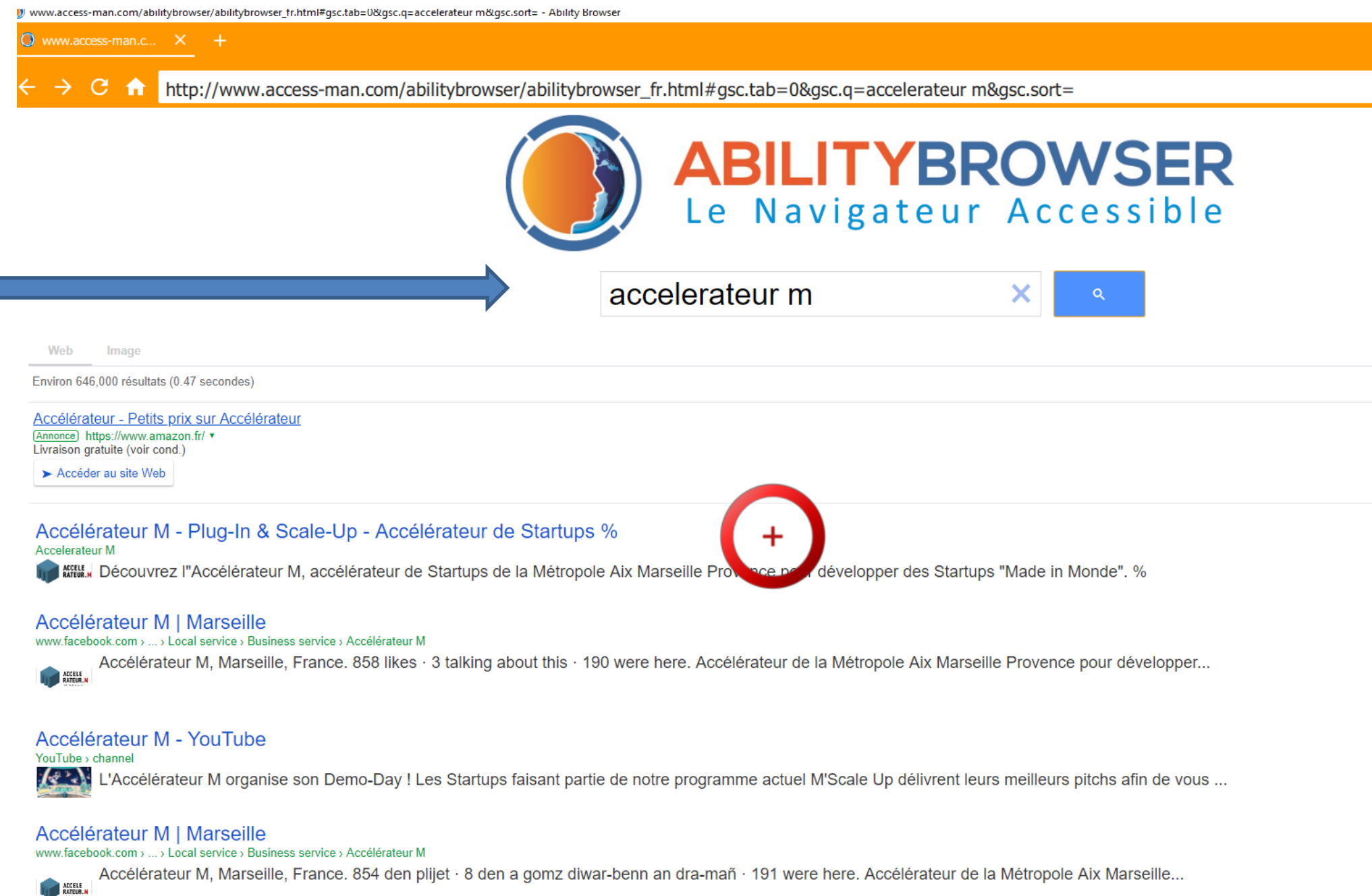

www.access-man.com/abilitybrowser/abilitybrowser_fr.html#gsc.tab=0&gsc.q=accélérateur m&gsc.sort= - Ability Browser

www.access-man.c... x +

← → ↻ 🏠 http://www.access-man.com/abilitybrowser/abilitybrowser_fr.html#gsc.tab=0&gsc.q=accélérateur m&gsc.sort=


 **ABILITYBROWSER**
Le Navigateur Accessible


accélérateur m


Web Image


Environ 646,000 résultats (0.47 secondes)

[Accélérateur - Petits prix sur Accélérateur](#)
(Annonce) https://www.amazon.fr/ Livraison gratuite (voir cond.)
[Accéder au site Web](#)

Accélérateur M - Plug-In & Scale-Up - Accélérateur de Startups %
Accélérateur M
 Découvrez l'Accélérateur M, accélérateur de Startups de la Métropole Aix Marseille Provence pour développer des Startups "Made in Monde". %

Accélérateur M | Marseille
www.facebook.com > ... > Local service > Business service > Accélérateur M
 Accélérateur M, Marseille, France. 858 likes · 3 talking about this · 190 were here. Accélérateur de la Métropole Aix Marseille Provence pour développer...

Accélérateur M - YouTube
YouTube > channel
 L'Accélérateur M organise son Demo-Day ! Les Startups faisant partie de notre programme actuel M'Scale Up délivrent leurs meilleurs pitches afin de vous ...

Accélérateur M | Marseille
www.facebook.com > ... > Local service > Business service > Accélérateur M
 Accélérateur M, Marseille, France. 854 den plijet · 8 den a gomz diwar-benn an dra-mañ · 191 were here. Accélérateur de la Métropole Aix Marseille...

Etape 3

2ème possibilité




google

Powered by iTechMomentum



Tapez d'abord Google

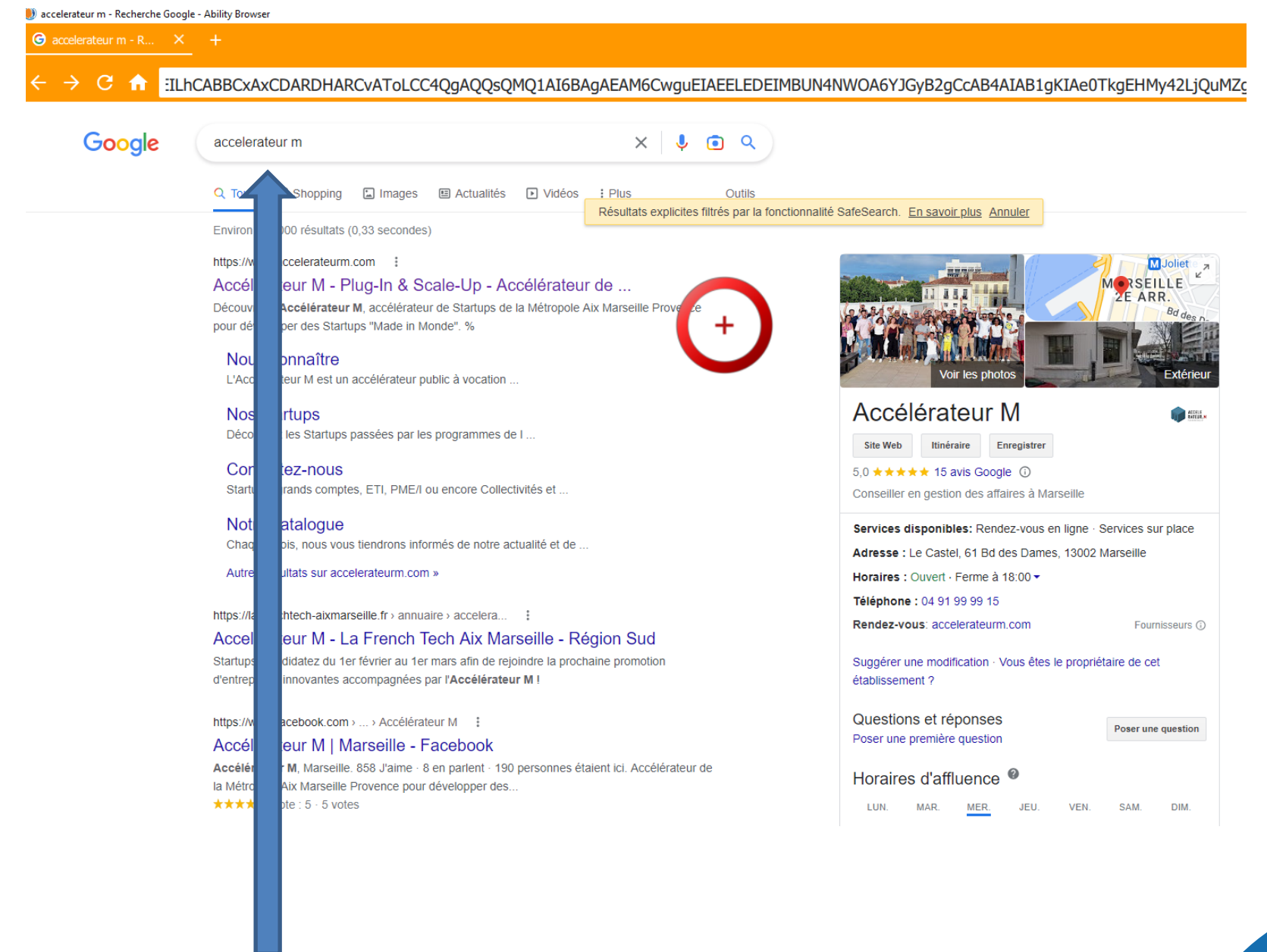

PUIS

Le nom du site que vous souhaitez consulter

Et les sites Non équipés d'Ability Browser ?

Etape 3

Tapez d'abord Google



2ème possibilité



Vous les retrouverez plus facilement avec la 2^{ème} possibilité

ET

Un TIMER apparait en haut à Droite (voir bout de la flèche)

On a tout de même souhaité les rendre consultables **5 min par jour**



Bonne utilisation



POUR NOUS CONTACTER

contact@helpp-life.fr  www.helpp-life.fr  06.62.18.20.39

